



Crosswalker



Ergometar za
potpuni trening

Crosswalker

Ergometar za potpuni trening

Crosswalker je ergometar za totalno vježbanje u kojem su i gornji i donji ekstremiteti u potpunosti uključeni u proizvodnju energije. Kombinacijom ova dva balistička pokreta, postavljaju se izuzetno visoki zahtjevi za kardio-respiratorni kapacitet korisnika.

Osim toga, ovaj ergometar je izuzetno prikladan za pacijente s kardiorespiratornim ograničenjima jer je moguće podesiti izuzetno nizak otpor od samo 5 W.

Jedinstveni režim "konstantnog momenta"

Sa EN-Cardio Crosswalkerom izbjegava se preopterećenje pacijenta koji se rehabilitira jer se „moment“ može održavati konstantnim. Za uređaje bez kontrole momenta, smanjenje broja rotacija u minuti (RPM) će rezultirati povećanjem otpora. Kod ovih ergometara može doći do rizika od preopterećenja, jer će otpor rasti kako pacijent sporije vrti pedale. Osim toga, za pacijente je to izuzetno frustrirajuće, jer kada se umore, vježba postaje još teža! Sa EN-Cardio Crosswalkerom i modom konstantnog obrtnog momenta to je izbjegnuto. Vaši pacijenti će moći da se rehabilituju na siguran i prijatan način.





Crosswalker

Kompatibilan sa EN-Train

EN-Cardio Crosswalker može se kontrolisati iz EN-Train koncepta tako da se cijeli trening može unaprijed sastaviti na jednostavan način. Protokol vježbanja i individualne vrijednosti treninga Crosswalkera se automatski postavljaju pomoću chip kartice. Rezultati se prate u softveru, pri čemu su progresija i regresija ugrađeni u program obuke.

Lako i pogodno za svakoga

EN-Cardio Crosswalker je izuzetno jednostavan za rukovanje. Uz pomoć EN-Train čip kartice sve je automatizirano, ali čak i bez nje Crosswalkerom može upravljati bilo ko! Sofisticirano i opsežno testirano sučelje osigurava da svi, mladi ili stari, mogu lako krenuti s ovim ergometrom visokih performansi.

- Ujednačenost u radu
- Ekran osjetljiv na dodir u punoj boji
- Ergonomski dizajn
- Kočioni sistem vrtložnih struja, otporan na habanje
- Praćenje pulsa pomoću Sigma Sport remena za prsa i ugrađenog prijemnika
- Pogon sa niskim nivoom buke
- Tehnologija pametnih kartica
- Gaming mod
- HR- trening zone

Crosswalker

1413931 Crosswalker

Opcionalni pribor

3496837 Sigma Sport transmitter

3496838 Elastični pojas za Sigma Sport transmitter



3496837



3496838

ORDERING DATA



Crosswalker

RELATED PRODUCTS

EN-Train

EN-Train concept daje vam potpunu kontrolu nad aktivnim procesom rehabilitacije, osiguravajući optimalan tretman u svakom trenutku. Trening šeme se lako mogu sastaviti koristeći preporuke za trening koje su već unaprijed programirane u softveru.

Podaci za naručivanje


1411811 EN-Train instalacioni kit



Crosswalker

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Napon:	100 – 240 V
Frekvencija:	50 - 60 Hz
Potrošnja:	otprilike. 40 VA
Princip kočenja:	procesom-kontrolirana vrtložno strujna kočnica
Monitoring otkucaja srca:	Uz pomoć Sigma Sport remena za prsa i prijemnika
Trening režimi:	konstantni obrtni moment konstantna snaga konstantni srčani ritam
Prikazani parametri treninga:	vrijeme, otkucaj srca, brzina, distanca, rad, snaga, otpor i RPM
Dimenzije (lxwxh):	190 x 55 x 177 cm
Težina:	80 kg
Max. težina pacijenta:	150 kg

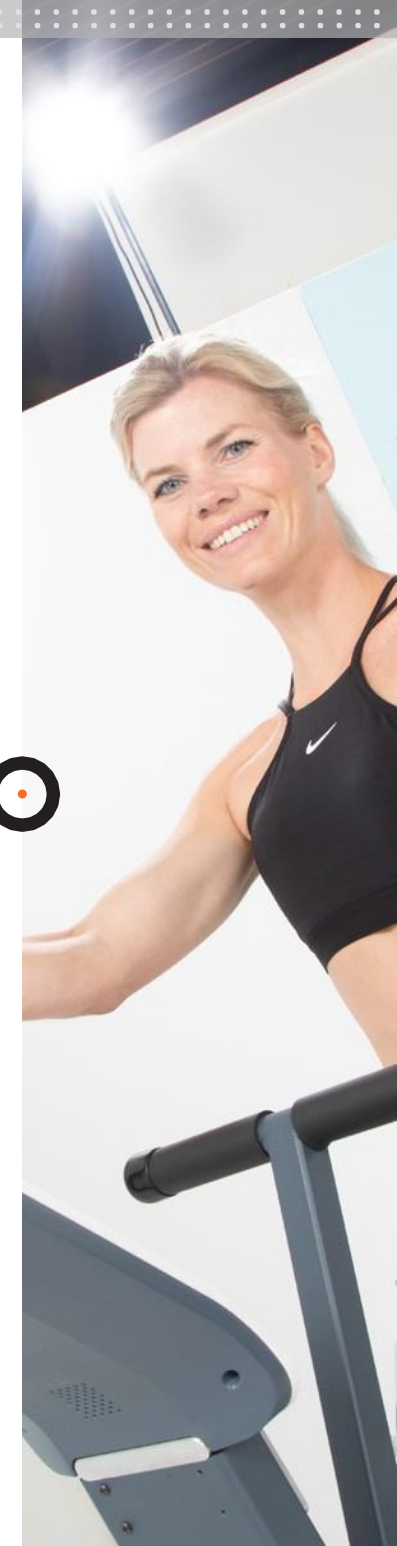



Crosswalker



Ergometar za
potpuni trening